

# CLASSIC line

## à portes battantes

**Type 90**

**Résistance au feu de 90 minutes.**

Armoires de sécurité avec étagères vario ou étagères coulissantes et/ou tiroirs de rétention pour l'entreposage de matières dangereuses dans des locaux de travail selon TRbF 20 annexe L.

Sécurité contrôlée de haut niveau, y compris :



**Sécurité contrôlée de haut niveau, y compris :**

- Homologation selon DIN EN 14470-1 délivrée par des organismes indépendants (TUV Süd, iBMB Braunschweig).
- Contrôle selon DIN EN 14727 (norme de meubles de laboratoires).
- Classification type 90 selon DIN EN 14470-1.
- GS/CE-Label.

**Principe de construction :**

- Portes à battants en tôle d'acier poudré.
- Corps extérieur en tôle d'acier poudré.
- Corps intérieur en plaques décor de haute qualité.

**Aménagement intérieur :**

- Au choix étagère coulissante ou étagères vario et/ou étagères, en tôle d'acier poudré ou en acier inoxydable.
- Jusqu'à 6 étagère coulissante par côté d'armoire.
- Jusqu'à 5 étagères vario par porte et 5 étagères vario par côté d'armoire.

**Coloration :**

- Portes battantes au choix en jaune zinc RAL 1018 ou gris clair RAL 7035.
- Corps complet en gris clair RAL 7035.
- Coloration individuelle possible.



Aération et évacuation d'air à chaque niveau de l'armoire, possibilité de contrôle optique des clapets d'arrêt d'air.



Surfaces d'armoire lisses, pas de charnières ou autres recouvrements.




Socket en retrait pour éviter de s'y heurter avec les pieds.



# en détails



Portes avec système de blocage intégré de série, les emballages peuvent ainsi être mis en place et retirés des deux mains. En cas d'incendie, la fermeture de la porte est déclenchée par un thermocouple.

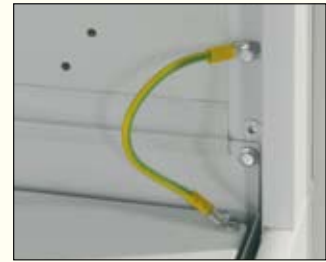

Languette de compensation du potentiel de série sur le toit de l'armoire pour un raccordement à la mise à la terre selon BGR 132 (exclusion de risque d'allumage). L'équipement intérieur est relié de manière conductrice avec la languette de compensation du potentiel.



Emplacement ergonomique de la serrure à hauteur de poignée et cylindre de fermeture intégré à la porte.



Ouverture et fermeture aisée à une main.



Pieds réglables à surface d'appui extra large pour une orientation aisée et une compensation du niveau, de l'intérieur et de l'extérieur.



Un dispositif de soulèvement peut être glissé sous l'armoire avec socle.